

X Family²

- высокая функциональность
и улучшенный внешний вид



Вы можете доверять Breezy!

Новое поколение инвалидных колясок
Breezy XFamily² даст ускорение Вашему бизнесу



Коляски Breezy - это надежность
Высококачественные прочные материалы обеспечивают надежное движение по любым дорогам и идеальное соотношение цены и качества. Улучшенная функциональность позиционирования пациента повышает его безопасность.

Все коляски Breezy XFamily² успешно прошли краш-тест согласно ISO 7176-19












The Breezy XFamily²!

Оптимизируйте Ваш менеджмент

Девять моделей - одна концепция. Вы можете использовать детали колясок и принадлежности для всех моделей.

Преимущества:

- Для специалистов розничной торговли – вы можете предлагать широкий спектр продукции
- Общие запчасти обеспечивают превосходную доходность
- Множество регулировок
- Минимальная площадь складирования товара

Стандартные	Облегченные	Комфортные	Активные	Функц-ные
<p>UniX²</p> <p>PariX²</p>  <p>Breezy UniX²</p>  <p>Breezy PariX²</p>	<p>RubiX²</p> <p>BasiX²</p>  <p>Breezy BasiX²</p>  <p>Breezy RubiX²</p>  <p>Breezy RubiX² XL</p>	<p>RubiX² Comfort</p>  <p>Breezy RubiX² Comfort</p>  <p>Breezy RubiX² Comfort XL</p>	<p>HeliX²</p>  <p>Breezy HeliX²</p>	<p>RelaX²</p>  <p>Breezy RelaX²</p>

Максимальное использование общих для всех моделей запасных частей для оптимальной экономии и совершенствования менеджмента

Взаимозаменяемость запасных частей означает, что вам потребуется меньше складских площадей

	Breezy Unix ²	Breezy PariX ²	Breezy BasiX ²	Breezy RubiX ²
Подножки	●	●	●	●
Подъемные подножки	●	●	●	●
Опора для культи	●	●	●	●
Подлокотники	-	●	●	●
Стандартные боковины	●	●	●	●
Боковины на стойках	-	-	●	●
Тормоз	●	●	●	●
Удлиненный рычаг тормоза	●	●	●	●
Передние колеса 6" и 8"	●	●	●	●
Задние колеса 22" и 24"	●	●	●	●
Барабанные тормоза	●	●	●	●
Обивка сиденья XeliX	●	-	-	-
Обивка сиденья BasiX	-	●	●	●
Антипрокидыватели	●	●	●	●
Защита спиц	●	●	●	●
Ремень безопасности	●	●	●	●

- Минимум усилий, максимум взаимозаменяемости
- Минимальный складской запас запасных частей
- Максимум индивидуальности

Минимум формальностей по заказу, максимум доходности.
 Серия Breezy XFamily² отличается не только большим диапазоном функций и замечательным дизайном, но и высокой экономичностью. Вы делаете заказ согласно вашим требованиям, а мы докажем вам, что цена на коляску ниже, по сравнению со сроком ее службы.

	Breezy Rubix ² XL	Breezy Rubix ² Comfort	Breezy Rubix ² Comfort XL	Breezy Helix ²	Breezy Relax ²
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	-
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●

X Family²





UniX²

Последняя разработка.
Прочная надежная конструкция.
Обеспечивает мобильность как
в помещениях, так и на улице.



Откидные боковины с регулируемыми подлокотниками (длинный или короткий)



Регулировка высоты сиденья (два варианта)



Подъемные подножки (опция)

XFamily²

PariX²[™]



Комбинированная рама (алюминий + сталь) для повышения прочности. Широкий диапазон регулировок.



Адаптер для регулировки высоты сиденья и положения оси заднего колеса



Регулируемый угол наклона оси вилки переднего колеса



Короткие и длинные комфортные подлокотники (два в одном)



BasiX²™

Большой диапазон регулировок, повышенная прочность - все это в комбинации с улучшенным внешним видом.



Новая усовершенствованная рама отличного дизайна. Регулировка глубины сиденья (41 и 46 см)



Возможность регулировки высоты спинки от 41 до 46см



Новый узел крепления вилки переднего колеса с регулировкой угла наклона оси (0°, 3°, 6°)

RubiX²

Широкий диапазон стандартных опций, в бланке заказа, в том числе регулировка угла наклона спинки, комфортное сиденье и подушка Jay позволяют подобрать коляску для любого пользователя.



Новый современный дизайн и повышенная прочность крестовины



Удобное сиденье и наклоняемая (опционально) позволяет пользователю чувствовать себя комфортно



4 ленты натяжения для регулировки упругости спинки высотой от 41 до 46 см



RubiX² XL

Rubix² XL рассчитана на пользователей весом до 170 кг. Коляска поставляется с шириной сиденья до 60 см



Новый узел крепления вилки переднего колеса с регулировкой угла наклона оси (0°, 3°, 6°)



Усиленная двойная крестовина



Барabanные тормоза (опция)

XFamily²

Helix²TM



Коляска активного типа для эффективного применения, в который сочетаются высокая прочность модели Rubix² и дополнительные опции для удобства пользователя.



Регулируемые натяжные ремни спинки и настройка высоты спинки 35-50 см для оптимальной эргономичности и комфорта (стандартная характеристика)



Регулировка угла наклона спинки для разной степени активности пользователя (опция)



На выбор предлагаются облегченные задние колеса, передние колеса и шины для активных пользователей.



Relax²

Современный дизайн высокий уровень комфорта и функциональности. Коляска с плавными регулировками и широким диапазоном опций.



Бесступенчатый наклон спинки от 0 до 35).
Наклон сиденья (-5 – 25)



Регулировка глубины сиденья от 42 до 50 см



Новый улучшенный механизм подножки

Аксессуары и дополнительный выбор сиденья.

XFamily² стандартная коляска с широким выбором опций, типов сидений и регулировок.



Регулировка высоты рукояток



Спинка с регулируемым углом наклона (30)



Складная спинка



Антипрокидыватели (откидные регулируемые)




Барабанные тормоза



Регулируемый по высоте подлокотники с мягкой обивкой (короткой или длинной)



Подъемные подножки (регулируются по углу наклона)

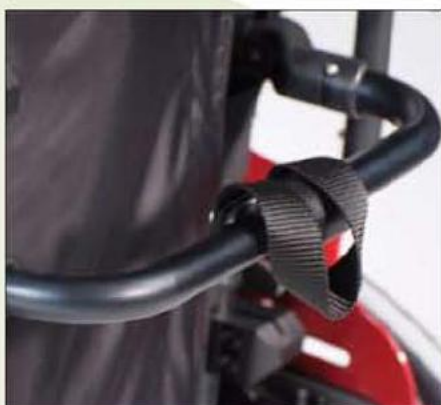

Складная стойка-распорка (против складывания спинки)



Опора для культи



Серия XFamily² сконструирована таким образом, чтобы пользователю обеспечивался оптимальный комфорт с различными вариантами сидений и спинок. Комфортные сиденья и спинки превосходно отвечают всем индивидуальным запросам. С широким диапазоном изделий Jay обеспечивается оптимальное позиционирование пользователя в коляске и поддержка его осанки



Jay Basic подушка противопролежневая сконструирована симметрично. Для клиентов с легкими повреждениями кожи, которым требуется комфорт и средний уровень поддержки осанки



Jay Soft Combi P – противопролежневая подушка сконструирована для клиентов с симметричной осанкой и легкими повреждениями кожи, которым требуется минимальная поддержка осанки



Jay Easy Visco – легкая подушка с высоким уровнем комфорта и стабильности




Jay 3 Back – спинки имеют антропометрический дизайн для поддержки и позиционирования. Широкий диапазон форм и размеров

The Breezy XFamily²!

Использование общих запчастей – увеличение экономии



	Breezy UniX²	Breezy PariX²
Ширина сиденья	38-50 см	38-52 см
Глубина сиденья	42 см	42,5 см
Высота сиденья	47-51 см	46-51 см
Угол сиденья	3°	0° и 3°
Высота спинки	40-42 см	41-43 см
Угол спинки	12°	12°
Допустимый уклон	10°	10°
Регулировка баланса	–	3,5 см до -3,5
Регулируемая обивка спинки	–	да
Боковины	короткая и длинная	регул. по высоте, короткая и длинная
Цвет	серебристый	серебристый
Вес	от 18 кг	от 16,6 кг
Макс. вес пользователя	125 кг	125 кг



	Breezy BasiX ²	Breezy RubiX ²	Breezy RubiX ² XL
	38-52 см	38-52 см	38-52 см
	43,5 см (41-46 см регул.)	41-51 см	41-51 см
	42,5-51 см	37,5-53 см	37,5-53 см
	0° до 6°	0° до 6°	0° до 6°
	43,5 см (41-46 см регул.)	43,5 см (41-46 см регул.)	43,5 см (41-46 см регул.)
	12° (7°-30°)	12° (-5°-20°)	12° (-5°-20°)
	10°	10°	10°
	5 см до -5 см	5 см до -5 см	5 см до -5 см
	да	да	да
	регул. по высоте, короткая и длинная	регул. по высоте, короткая и длинная скользящая	регул. по высоте, короткая и длинная скользящая
	серебристый	серебристый, красный, голубой	серебристый, красный, голубой
	от 14,9 кг	от 14,9 кг	от 16,8 кг
	125 кг	125 кг	170 кг



	Breezy Rubix² Comfort	Breezy Helix²
Ширина сиденья	38-52 см (52-60см XL ver)	38-52 см (52-60см XL ver)
Глубина сиденья	41-48,5 см	41-51 см
Высота сиденья	37,5-53 (37,5-51 см XL ver)	35,5-53 (37,5-51 см XL ver)
Угол сиденья	0° до 6°	0° до 6°
Высота спинки	46 см	35-50 см
Угол спинки	7° до 30° регул.	12° (-5° до 20° регул.)
Допустимый уклон	10°	10°
Регулировка баланса	5 см до -5 см	5 см до -7,5 см
Регулируемая обивка спинки	да	да
Боковины	регул. по высоте, короткая и длинная скользящая	регул. по высоте, короткая и длинная
Цвет	серебристый, красный, голубой	серебристый, красный, голубой, черная
Вес	от 15,5 кг / XL Ver от 16,8 кг	от 15,5 кг / XL Ver от 16,8 кг
Макс. вес пользователя	125 кг / XL Ver 170 кг	125 кг / XL Ver от 170 кг



Breezy
Relax²

41 (37-43), 46 (42-48), 51 (47-53) см, 53см XL ver

42-50 см

42,5-50 см

0° до 25° / -3° -22°

55-60 см

0° до 35°

10°

-

-

регул. по высоте и глубине, скользящая

серебристый

от 34 кг

145 кг (170 кг XL Ver)

