

ACCUNIQ

Новый стандарт

Каталог продукции



ACCUNIQ

www.accunIQ.com

ВВЕДЕНИЕ

SELVAS Healthcare

SELVAS Healthcare (ранее Jawon Medical) - это современная медицинская компания, которая неуклонно росла благодаря постоянным инновациям в течение последних 20 лет. Благодаря нашим анализаторам состава тела, автоматическим тонометрам и портативным устройствам, выпускаемым под торговой маркой ACCUNIQ, мы обеспечиваем точную диагностику и комплексные индивидуальные решения в целях здравоохранения.

О нас
SELVAS Healthcare
SELVAS Group
Партнеры

О торговой марке
ACCUNIQ

Технология

SELVAS Group




Партнеры



О бренде ACCUNIQ

ACCUNIQ - торговая марка, сочетающая в себе точность и уникальность. Это оборудование стремится лучше понять ваше тело и улучшить его сбалансированность благодаря точной диагностике, а также проверенным техническим решениям. Кроме того, с учетом удовлетворенности клиентов, самого высокого приоритета, ACCUNIQ разрабатывает и предоставляет высококачественные продукты и услуги, поддерживаемые передовыми технологиями.

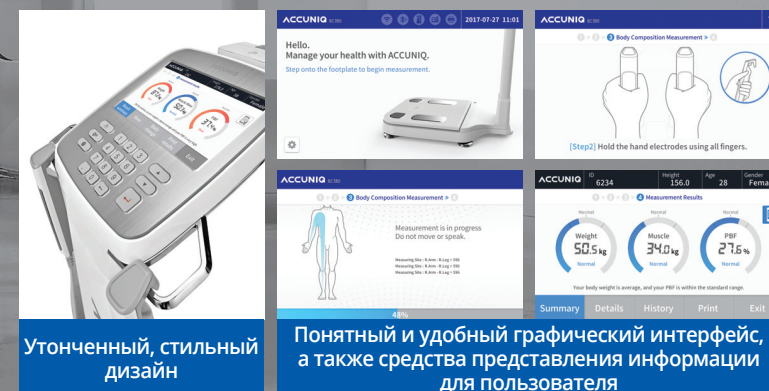


Технологии ACCUNIQ

Высокая степень соответствия с DEXA

Методы анализа состава тела включают в себя компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и подводное взвешивание. Рентгеновская костная денситометрия (DEXA) в настоящее время считается золотым стандартом, поскольку она точно анализирует ваш жир, мышцы и кости при низком уровне радиационного воздействия.

ACCUNIQ провела клинические испытания совместно с ИНТ, профессиональной клинической организацией, базирующейся в Техасе, США, для проверки с помощью DEXA точности нашего продукта. Результат показывает, что наш анализ более точен, чем у наших конкурентов.

DEXA с фотонным оптоволоконном, X-SCAN PLUS 970

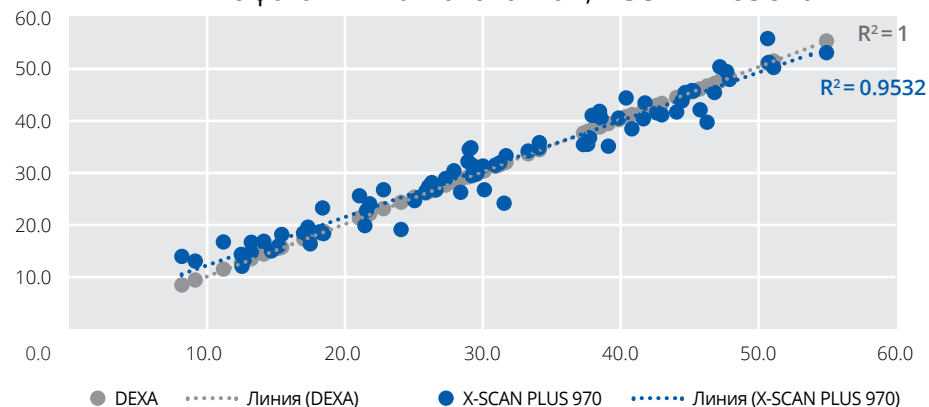


DEXA-ACCUNIQ	Анализ состава тела методом парного t-критерия									Коэффициент детерминации между нашими продуктами (X-SCAN PLUS 970 и ACCUNIQ BCA (анализ состава тела))	Тощая масса (LBM) R ²		
	Процент жира в организме (PBF)			Жировая масса (кг)			Тощая масса (кг)				BC720	BC510	BC360
	Среднее ±SD	p-значение	Пояснение p-значения	Среднее ±SD	p-значение	Пояснение p-значения	Среднее ±SD	p-значение	Пояснение p-значения				
	-0.4±0.7	0.17	DEXA PBF = ACCUNIQ PBF	-0.4±0.2	0.06	DEXA PBF = ACCUNIQ PBF	0±0.3	0.99	DEXA PBF = ACCUNIQ PBF		0.9967	0.9949	0.9962

※Коэффициент детерминации R² DEXA равен 1.

※Точность X-SCAN PLUS 970 подтверждена клиническим исследованием с помощью DEXA в центре ИНТ, Сан-Антонио, штат Техас. Высокая корреляция со всеми моделями ACCUNIQ подтверждает точность.


Многочастотный анализ

ACCUNIQ использует 6 частот между 1 кГц и 1000 кГц для точного анализа внутриклеточной воды, внеклеточной воды и общей воды организма. Частота ниже 100 кГц используется для анализа внеклеточной воды, поскольку она протекает вдоль клеточной мембраны, тогда как частота выше 100 кГц используется для анализа общей воды тела поскольку она проходит через клеточную мембрану.

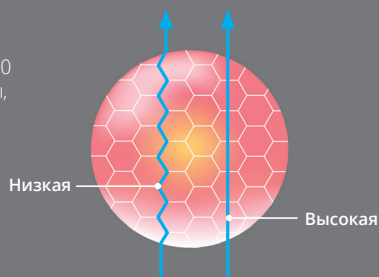

8-точечные контактные электроды

ACCUNIQ использует метод 8-точечных контактных электродов, который является очень точным, несмотря на его сложность. Восемь электродов могут быть размещены на руках и ногах, запястьях и лодыжках, чтобы максимально точно анализировать состав тела.

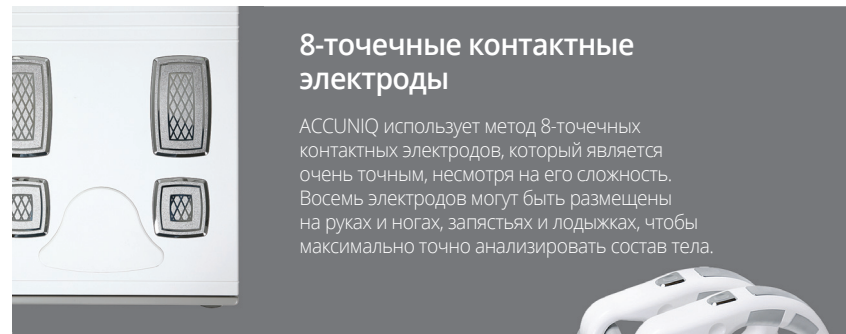

ПРОДУКТ

Высоко-технологичный анализатор состава тела ACCUNIQ BC720
ACCUNIQ BC510

Стандартный анализатор состава тела
ACCUNIQ BC380
ACCUNIQ BC360



ACCUNIQ BC720

Высокотехнологичный анализатор состава тела

Характеристики

8,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран


Диапазон частот 1, 5, 50, 250, 550, 1000 кГц

- Оценка и профилактика факторов риска путем прогнозирования уровня абдоминального жира и измерений фазового угла
- Ультразвуковой датчик роста специально для BC720 (опционально)
- Максимально подробная оценка баланса воды
- Поддержка QR-кода на экране результатов
- Управление данными с помощью ACCUNIQ Manager

Анализ результатов

- Анализ состава тела: Внутриклеточная вода, внеклеточная вода, общая вода, жировая масса, мягкая тощая масса, масса скелетных мышц и тощая масса
- Индекс массы тела, процент жира в организме, скорость базального метаболизма, ежедневно требуемые калории, физический возраст и оценка типа тела.
- Различные типы оценки абдоминального жира: Уровень висцерального жира, площадь висцерального жира, индекс «талия-бедро», масса подкожного жира, масса висцерального жира и прогнозирование абдоминального жира
- ECW/TBW (внеклеточная вода/общая вода организма), ECW/TBW для каждого сегмента и фазовый угол
- Сегментный анализ: Мягкая тощая масса (двойственный график), масса жировой массы, ECW/TBW, вода в организме, внутриклеточная вода и внеклеточная вода
- График изменения состава тела Вес, масса скелетных мышц, жировая масса, процент жира в организме, индекс массы тела, индекс «талия-бедро» и ECW/TBW
- Лист результатов сегментного анализа: Совокупный график изменений состава тела и таблица оценки типа тела (20 уровней)

Лист результатов

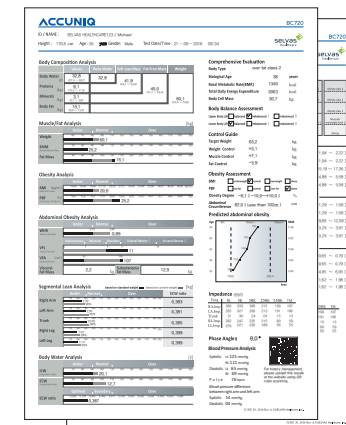

- Результаты анализа состава тела
- Результаты сегментного анализа
- Лист результатов для детей (опционально)



ACCUNIQ BC510

Высокотехнологичный анализатор состава тела

Характеристики

7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран


Диапазон частот 5, 50, 250, 550 кГц

- Отображает тип абдоминального жира в листе результатов сегментного анализа
- Оценка баланса воды
- Поддержка QR-кода на экране результатов
- Управление данными с помощью ACCUNIQ Manager

Анализ результатов

- Анализ состава тела: Внутриклеточная вода, внеклеточная вода, общая вода, жировая масса, мягкая тощая масса, масса скелетных мышц и тощая масса
- Индекс массы тела, процент жира в организме, скорость базального метаболизма, ежедневно требуемые калории, физический возраст и оценка типа тела.
- Различные типы оценки абдоминального жира: Уровень висцерального жира, площадь висцерального жира, индекс «талия-бедро» (WHR) и окружность живота
- Анализ общей воды: Внутриклеточная вода, внеклеточная вода и ECW/TBW
- Сегментный анализ: Мягкая тощая масса (двойственный график)
- Контроль веса: Рекомендованный вес, контроль веса, контроль тощей массы и контроль жировой ткани
- Результаты сегментного анализа (опционально): Таблица оценки типа тела (20 уровней) и тип жировой ткани

Лист результатов

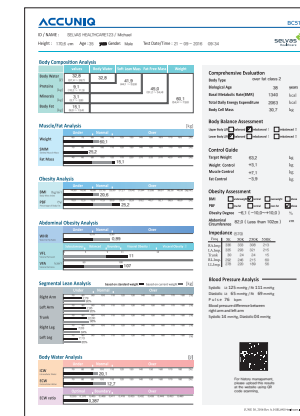

- Результаты анализа состава тела
- Результаты сегментного анализа (опционально)
- Лист результатов для детей (опционально)



ACCUNIQ BC380

Новый стандарт анализаторов состава тела



Характеристики

7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран


Диапазон частот 5, 50, 250 кГц

- Эргономичный дизайн, позволяющий пользователю регулировать высоту и размер подставки для ног
- Улучшенный интерфейс с расширенными возможностями
- Обслуживание клиентов с помощью программ удаленной поддержки (ACCUNIQ Remote Support)
- Поддержка QR-кода на экране результатов
- Управление данными с помощью ACCUNIQ Manager
- Поддержка Wi-Fi и Bluetooth (опционально)
- Поддержка Bluetooth (опционально)
- Доступна различная цветовая гамма

Анализ результатов

- Анализ состава тела: Внутриклеточная вода, внеклеточная вода, общая вода, жировая масса, мягкая тощая масса, масса скелетных мышц и тощая масса
- Индекс массы тела, процент жира в организме, скорость базального метаболизма, ежедневно требуемые калории, физический возраст и оценка типа тела, общий рейтинг.
- Различные типы оценки абдоминального жира: Уровень висцерального жира, площадь висцерального жира, индекс «талия-бедро» (WHR) и окружность живота
- Контроль веса: Рекомендованный вес, контроль веса, контроль тощей массы и контроль жировой ткани
- ECW/TBW всего тела
- Сегментный анализ: Графики анализа мышц и жира для каждого сегмента

Лист результатов

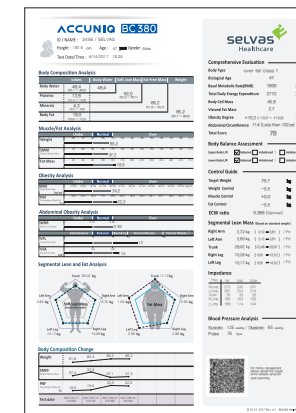

- Результаты анализа состава тела
- Лист результатов для детей (опционально)

ACCUNIQ BC360

Стандартный анализатор состава тела



Характеристики

7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран


Диапазон частот 5, 50, 250 кГц

- Установка еженедельных контрольных целей
- Оценка баланса воды
- Поддержка QR-кода на экране результатов
- Управление данными с помощью ACCUNIQ Manager

Анализ результатов

- Анализ состава тела: Внутриклеточная вода, внеклеточная вода, общая вода, жировая масса, мягкая тощая масса, масса скелетных мышц и тощая масса
- Индекс массы тела, процент жира в организме, скорость базального метаболизма, ежедневно требуемые калории, физический возраст и оценка типа тела
- Различные типы оценки абдоминального жира: Уровень висцерального жира, площадь висцерального жира, индекс «талия-бедро» (WHR) и окружность живота
- Контрольные цели: Еженедельный контроль и контрольный период
- ECW/TBW всего тела
- Сегментный анализ: Тощая масса и жировая масса

Лист результатов

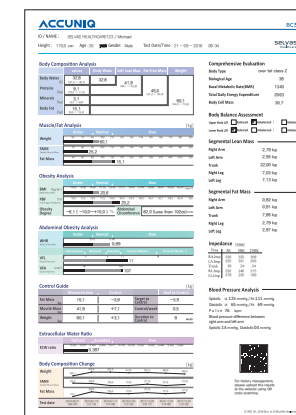

- Результаты анализа состава тела
- Лист результатов для детей (опционально)

ПРОДУКТ

Портативный
анализатор
состава тела
ACCUNIQ BC300
ACCUNIQ BC310

Тонометр
на обе руки
ACCUNIQ BP850

Круглосуточный
тонометр
ACCUNIQ BP800



ACCUNIQ BC300

Портативный анализатор состава тела

Характеристики

7-дюймовый цветной ЖК-экран

Диапазон частот 5, 50, 250 кГц


- Сверхлегкий и складывающийся дизайн
- Весит около 10 кг, легко перемещать и устанавливать
- Специальная сумка для безопасной транспортировки (опционально)
- Управление данными с помощью ACCUNIQ Manager

Анализ результатов

- Анализ состава тела:
Внутриклеточная вода, внеклеточная вода, общая вода, жировая масса, мягкая тощая масса, масса скелетных мышц и тощая масса
- Индекс массы тела, процент жира в организме, скорость базального метаболизма, ежедневно требуемые калории, физический возраст и оценка типа тела.
- Различные типы оценки абдоминального жира: Уровень висцерального жира, площадь висцерального жира, индекс «талия-бедро» (WHR) и окружность живота
- Сегментный анализ: Тощая масса и жировая масса
- Изменение состава тела: Вес, жировая масса и тощая масса (раньше и сейчас)



Лист результатов

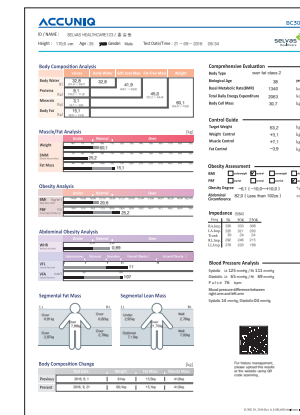

- Результаты анализа состава тела
- Лист результатов для детей (опционально)

ACCUNIQ BC310

Базовый анализатор состава тела

Характеристики

Монохромный ЖК-дисплей

Диапазон частот 5, 50, 250 кГц

- Низкие частоты позволяют проводить быстрый и простой анализ.
- Встроенный термопринтер
- Универсальное расположение (на столе/на стене/отдельно стоящий)

Анализ результатов

- Анализ состава тела:
Вес, стандартный вес, тощая масса, общая вода, внутриклеточная вода, внеклеточная вода
- Индекс массы тела, масса жировой ткани, процент жира в организме
- Индекс «талия-бедро» (WHR), скорость базального метаболизма
- Анализ общей воды: Отношение ECW/TBW
- Сегментный анализ тощей массы
- Контроль веса: Цель для контроля, установка целей




Верхняя часть тела



Нижняя часть тела

Лист результатов

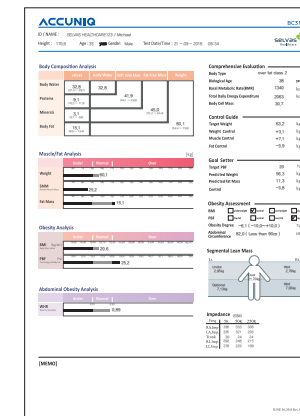

- Результаты анализа состава тела

ACCUNIQ BP850

Первый в мире тонометр на обе руки



Характеристики

7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран

Диапазоны измерения:

**Давление 30 ~ 300 мм рт.ст.,
пульс 30 ~ 200 ударов в минуту**

- Различные листы результатов и методы измерения (измерение на левой и правой руках, а также обеих рук одновременно)
- Простая в использовании кнопка, управляемая одним касанием; ручной переключатель и педальный переключатель (поставляется со специальным столом и стулом)
- Высокоскоростной термопринтер с простой заменой бумаги и быстрой печатью
- Кольцевые направляющие с диаметром 150 мм для удобства пользователя
- Манжеты и датчик пульса на одном уровне, чтобы сделать анализ более точным

Анализ результатов

- Измерение на одной руке: Систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, среднее значение артериального давления, пульс, график пульсовой волны, оценка артериального давления
- Измерение на обеих руках: Систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, среднее значение артериального давления, пульс, график пульсовой волны, оценка артериального давления, разница давления между руками



Лист результатов

2011 / 05 / 23 15:07	
Lt	
SYSTOLIC	125 mmHg
DIASTOLIC	65 mmHg
MEANPRESS	85 mmHg
PULSE	78 bpm
Rt	
SYSTOLIC	111 mmHg
DIASTOLIC	69 mmHg
MEANPRESS	83 mmHg
PULSE	78 bpm
Inter-arm Difference	
SYSTOLIC	14 mmHg
DIASTOLIC	04 mmHg
Refer to the results and consult to physician about specific medical information.	

Базовый

ACCUNIQ BP800

Амбулаторный тонометр



Характеристики

ТН ЖК ДИСПЛЕЙ


Диапазоны измерения:

**Давление 30 ~ 300 мм рт.ст.,
пульс 30 ~ 240 ударов в минуту**

- компактный, весом 155 г
- Тихая работа, которая не нарушает ваш сон
- Эргономичный дизайн, который не мешает движению
- Сохраняет до 576 записей данных артериального давления
- Можно использовать USB-кабель для удобной коммуникации
- Датчик движения для отслеживания действий
- Специальная программа под Windows для управления данными
- Можно установить требуемое время для измерения артериального давления, частота и режим работы.

Анализ результатов

- Систолическое, диастолическое среднее артериальное давление, пульсовое давление, пульс, анализ (график пульсовой волны - оценка артериального давления), статус движения

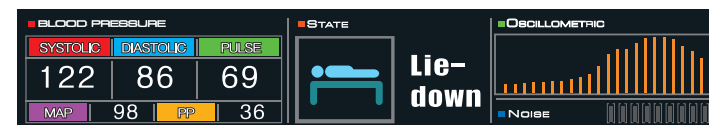

ПРОДУКТ

Тонومتر
ACCUNIQ BP250
ACCUNIQ BP210

ОПЦИОНАЛЬНО

Анализ состава тела
Ультразвуковой |
ростомер
Электрод
для голеностопных
суставов
Результаты
сегментного анализа
Лист результатов
для детей

Тонومتر
Задний монитор
Дополнительные
характеристики
вывода данных
Тележка/Стул
(регулируемый
по высоте)

ACCUNIQ BP250

Высокотехнологичный тонометр

Характеристики

**7-дюймовый
цветной сенсорный ЖК-экран**

**Диапазоны измерения:
Давление 30 ~ 300 мм рт.ст.,
пульс 30 ~ 240 ударов в минуту**

- Первый в мире автоматический монитор артериального давления, который отображает QR-коды на ЖК-экране. Графический и простой вывод данных.
- Функция управления одним касанием
- Интегрированная программа голосового управления и система аварийной безопасности
- Управление данными с помощью мобильного устройства
- Тыльная сторона монитора для ввода данных
- Встроенный высокоскоростной принтер и автоматический резак для обеспечения чистой и быстрой печати
- Встроенный считыватель карт для отслеживания и сравнения результатов
- Функция автоматического включения/выключения с датчиком приближения (функция энергосбережения)



ACCUNIQ BP210

Стандартный тонометр

Характеристики

Светодиодный индикатор высокой яркости

**Диапазоны измерения:
Давление 30 ~ 300 мм рт.ст.,
пульс 30 ~ 240 ударов в минуту**

- Автоматический монитор артериального давления; Самый продаваемый монитор артериального давления ACCUNIQ
- Функция управления одним касанием
- Интегрированная программа голосового управления и система аварийной безопасности
- Управление данными с помощью мобильного устройства
- Тыльная сторона монитора для ввода данных
- Встроенный высокоскоростной принтер и автоматический резак для обеспечения чистой и быстрой печати
- Встроенный считыватель карт для отслеживания и сравнения результатов
- Функция автоматического включения/выключения с датчиком приближения (функция энергосбережения)



Анализ результатов



- Систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление, пульсовое давление, пульс, анализ (график пульсовой волны - оценка артериального давления)
- Задний монитор (опционально): Систолическое и диастолическое артериальное давление, пульс, ID, индекс массы тела, жирность



Графический
вывод данных

Простой
вывод данных

Лист результатов

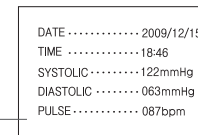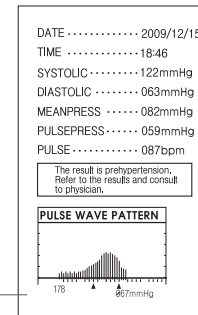



Анализ результатов

- Систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление, пульсовое давление, пульс, анализ (график пульсовой волны - оценка артериального давления)
- Задний монитор (опционально): Систолическое и диастолическое артериальное давление, пульс, ID, индекс массы тела, жирность

Графический
вывод данных

Простой
вывод данных

Лист результатов

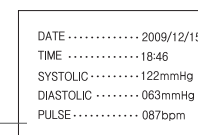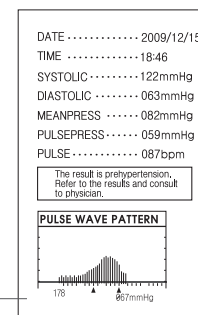



Ультразвуковой ростомер

(BC720/BC510/BC380/BC360/BC300 Опционально)


Это устройство автоматически, быстро и более точно измеряет рост, используя технологию искусственного интеллекта и ультразвукового измерения.



Электрод для голеностопных суставов

(BC720/BC510/BC380/BC360 Опционально)

Электроды для голеностопных суставов позволяют измерять процент жира в организме без снятия носков. В дополнение к удобству, они гигиеничны, предотвращают появление бактерий и плесени, и могут давать более точные результаты анализа для людей с грубой, сухой и толстой кожей ног.

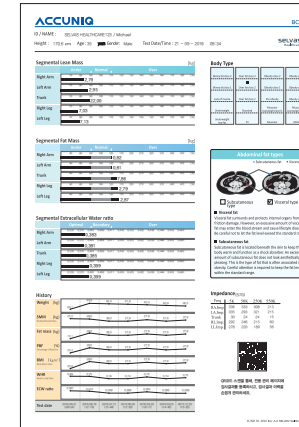

Результаты сегментного анализа


(BC720 стандартный / BC510 Опционально)

- Сегментный анализ тощей массы/жировая масса/доля внеклеточной воды
- Совокупный график изменений состава тела
- таблица оценки типа тела (20 уровней)
- Импеданс
- QR-код



Задний монитор (BP250/BP210 Опционально)

Этот монитор устанавливается за экраном тонометра, чтобы его мог видеть оператор. Кнопки монитора можно использовать для управления измерением артериального давления. Кроме того, управление данными проще при вводе персональных данных.

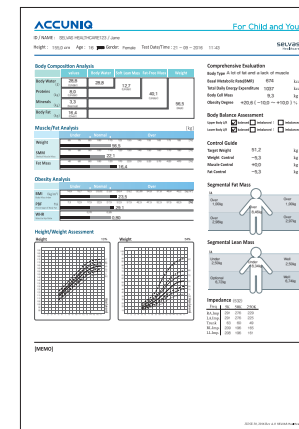

Лист результатов для детей

(все опционально)

- Анализ состава тела
- Анализ Мышцы/Жир
- Анализ ожирения
- Оценка роста/веса
- Сегментный анализ тощей/жирной массы
- Импеданс

Опциональный вывод данных тонометра

Above data is reference value. It is necessary to consult with a doctor for exact diagnosis and treatment.

SELVAS Healthcare, Inc.

ID-NO 000000001
 HEIGHT 158.0 cm
 WEIGHT 056.0 kg
 FATNESS 101%
 B.M.I. 22.4 kg/m²

ID-NO 000000001

DATE / TIME	SYSTOLIC (mmHg)	DIASTOLIC (mmHg)	PULSE (b/min)
09-12-08 8:48	112	66	83
09-12-01 10:31	111	60	77
09-11-24 10:29	119	90	63
08-11-17 10:19	119	72	81
09-11-10 10:10	156	90	81
09-11-04 10:29	105	60	78

1. Ввод названия организации
 Вводят название учреждения в выбранном базовом листе результатов.

2. Задний монитор ID, рост, вес, ожирение и ИМТ человека печатаются на выбранном базовом листе результатов.

3. Магнитная карта/ RFID-карта ID человека и накопленные данные за последние шесть раз печатаются на выбранном базовом листе результатов.




Стул (регулируемый по высоте)

(BP250/BP210 Опционально)

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОГРАММА
ACCUNIQ MANAGER

ПРИЛОЖЕНИЕ
ACCUNIQ APP

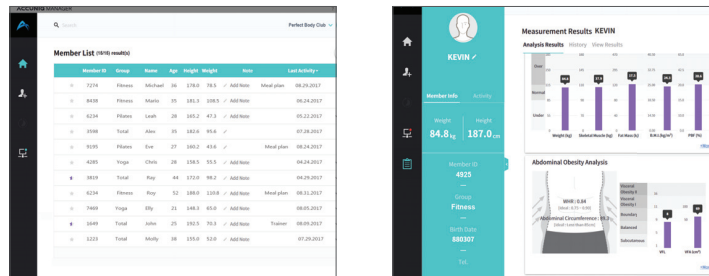

ACCUNIQ MANAGER

Программное обеспечение

Характеристики

ACCUNIQ MANAGER - это решение для управления данными о здоровье клиентов, которое фиксирует и отображает все результаты анализа состава тела.

- Можно создавать сравнения исторических данных, чтобы показать прогресс и помочь персонализировать свою диету и выполнять рекомендации на основе результатов анализа.
- Печать полнотекстовых отчетов, квитанций или передача результатов на другие устройства.
- Рекомендация персонализированной диеты и программы упражнений для достижения целей.
- Простая и интуитивная схема экрана с графическим представлением данных.
- Экран показывает результаты систематического анализа состава тела отдельных пользователей и обеспечивает эффективную обработку данных.

ACCUNIQ APP

Мобильное приложение

Характеристики

Приложение ACCUNIQ является мобильным сервисом для управления личными данными по составу тела. Можно сканировать QR-код результата измерения состава тела с помощью смартфона, чтобы клиенты мог проверить результат в любое время.

- Отображает графические статистические показатели результатов и изменений состава тела.
- Контрольные показатели отражают рекомендации по потреблению калорий и уровню упражнений для достижения нормального диапазона.
- Сохраняет данные всех измерений и показывает графику уровней измерений во времени и нормальные диапазоны.



5:48

Body Com

20.9 kg/m²

Body Composi

body water

26.9 L

Proteins

7.4 kg

Minerals

2.5 kg

Body Fat

14.1 kg



Comprehensiv

Standard

Your body weight is average, and your PBF is within the standard range.



ACCUNIQ - мировой поставщик медицинских изделий для фитнес-клубов, больниц, медицинских учреждений, кабинетов врачей, центров по снижению веса, общественных оздоровительных центров и магазинов розничной торговли.

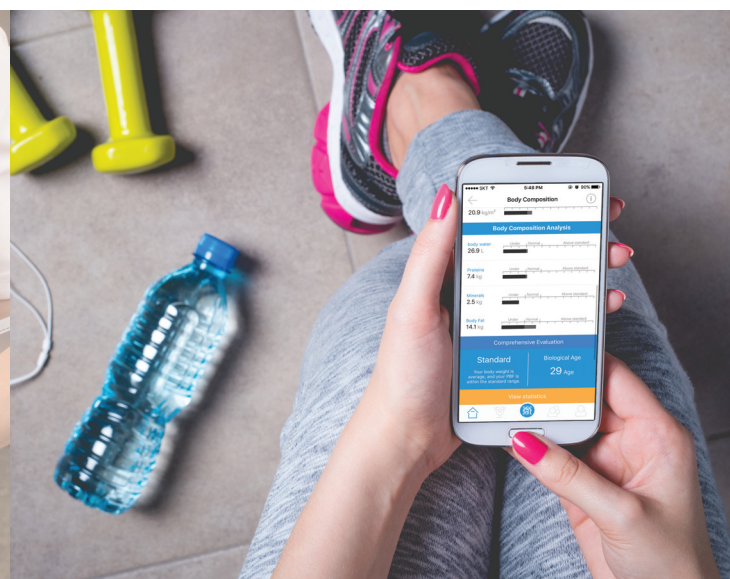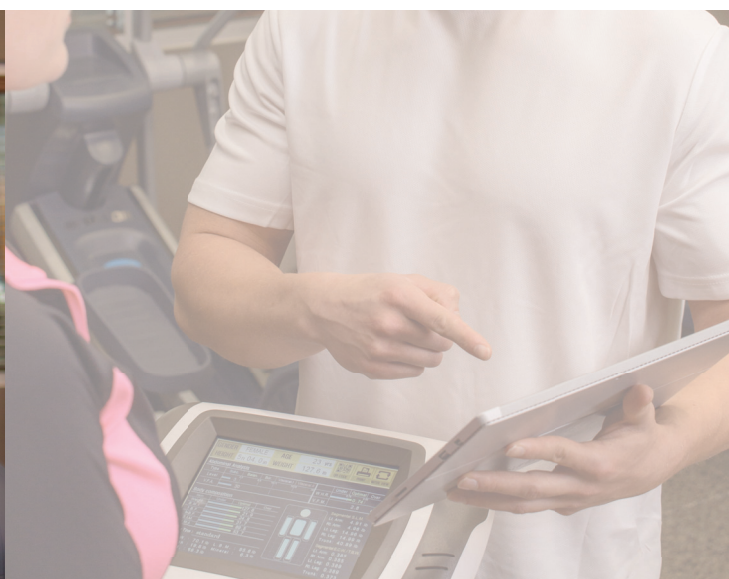

Сертификаты и награды



GMPC Certified



CE Certified



TUV Rheinland
Certified



FDA Approved



GoodDesign
Award



Presidential
Award in National
Venture Award



Bronze Medal of
Industrial Effort in
Precision Technology
Promotion Contest



HQ 155, Shinseong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea
TEL. +82-42-864-4460 | ФАКС +82-42-864-4462

ОФИС В СЕУЛЕ (Отдел продаж) 20F, 19, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Сеул, Korea TEL
TEL. +82-2-587-4056 | ФАКС +82-2-588-1937 | EMAIL internationalsales@ac

Copyright © SELVAS Healthcare, Inc. Все права защищены.