

# ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Xenon, Xenon SA, Quickie Life, Neon, Neon SA,  
Helium, Argon, Argon TI





# ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ




<b>здел 1 - сиденье</b>	
Ремни сиденья	4
Подушки сиденья	5
Подушки JAY	6
<b>Раздел 2 - Спинка</b>	
Спинка	8
Обивка спинки	12
Рукоятки	14
Опции	16
<b>здел 3 - одлокотники и боковые ограждения</b>	
Подлокотники	19
Боковины	20
<b>здел 4 - поры для ног</b>	
Подножки	24
Опоры для стоп	26
<b>Раздел 4 - Пластинчатые осевые адаптеры</b>	
Осевые адаптеры	31
<b>здел 5 - передние и задние колёса</b>	
Линки передних колёс	33
Передние колёса	36
Задние колёса	38
Крышки	40
Бручи	42
Щит спиц	44
Сормоз	46
<b>здел 6 - аксессуары</b>	
Аксессуары	48

# Сиденье

## Обивка сиденья

Обивка сиденья различается для колясок с жесткой рамой (Argon) и колясок со складной рамой (Neon). Оба типа обивки обеспечивают жесткое основание для подушки сиденья и могут поставляться на выбор с карманом для принадлежностей или карманом для катетера, расположенном на нижней стороне обивки сиденья

Обивка 1-м карманом для принадлежностей

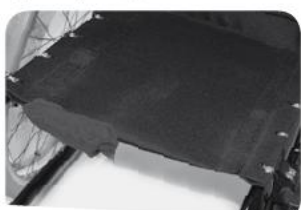

Имеется для всех моделей

Обивка с карманом для катетера



Не поставляется для Q. Life

Обивка 2-мя карманами для принадлежностей



Не поставляется для Q. Life

**Облегчённая обивка сиденья** – опция имеется для колясок Xenon, Xenon SA, Neon и Neon SA

Изготовленная из вентилируемого материала с отверстиями, облегчённая обивка сиденья обеспечивает снижение общего веса коляски для активных пользователей, у которых каждый грамм на счету.


Поставляется на выбор с различными карманами: с 1 карманом (3014) или 2-мя карманами (3017) для принадлежностей или с карманом для катетера (3018)



**Обивка сиденья в виде лент с велкро (продуваемая)**

– опция имеется для коляски Helium

Поставляется на выбор с различными карманами: с 1 карманом (3014) или 2-мя карманами (3017) для принадлежностей или с карманом для катетера (3018)

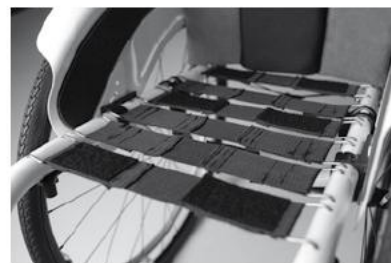

**Сплошное мягкое сиденье** – опция имеется для инвалидных колясок Neon и Neon SA (3010).

Эти сиденья выполнены в виде деревянного основания с подушкой из вспененного материала. Размеры сиденья имеются для всех размеров рамы.







## Подушки



### Подушка на сиденье с чёрным чехлом

Опция имеется для всех моделей колясок

Данная подушка, поставляемая со съёмным моющимся чехлом, изготавливается из каучука (толщиной 5 или 8 см) или из вспененного материала (толщиной в 3 или 5 см).



### Подушка на сиденье с водонепроницаемым / воздухопроницаемым чехлом

Опция имеется для всех моделей колясок.

Данная подушка изготовлена с воздухопроницаемым внутренним чехлом, имеющим водонепроницаемое покрытие, которое в то же время даёт воздуху возможность циркулировать при пользовании подушкой.

Как и стандартная подушка на сиденье, данная подушка, изготавливается из каучука (толщиной в 5 или 8 см) или из пеноматериала (толщиной в 3 или 5 см).



### Терапевтический чехол на подушку из кожи ягнёнка - данная опция имеется колясок для Neon и Neon SA (1404)

Он идеально подходит для пользователей, которым требуется дополнительное тепло и мягкость сиденья. Чехол полностью съёмный, подходит для стандартной подушки на сиденье.

Поставляется в 3х размерах по ширине: 35 см, 40 см или 45 см

# Ортопедические подушки и спинки Jay

JAY® предлагает полный набор подушек на сиденье и спинку, которые удовлетворят индивидуальные потребности пользователей. **Комфортные подушки** предназначены для пользователей со средней и низкой потребностью в защите от пролежней и позиционировании. **Противопрлежневые подушки** предназначены для пользователей со средней потребностью в защите от пролежней и позиционировании, а **позиционирующие противопрлежневые** – для пользователей с более высокими потребностями позиционирования и/или с высоким риском образования пролежней.

Более подробную информацию Вы можете посмотреть в брошюре JAY® или в форме заказа.



Soft Combi P



Easy Visco



Xtreme



Easy Fluid



Active



## Спинки Jay

Спинки JAY® разработаны для обеспечения стабилизации положения задней и боковой части таза и увеличения стабильности положения тела пользователя. Они мало весят и легко регулируются благодаря простой процедуре монтажа. Спинки JAY® снимают усталость и обеспечивают пользователей максимальным комфортом и стабильностью, с ними пользователи смогут с уверенностью совершать любые поездки .

Более подробную информацию Вы можете получить в брошюре JAY® или в бланке заказа.

Варианты контура изгиба и и высоты спинок




Не глубокий контур (SC)



Контур средней глубины (MC)





Глубокий контур (DC)

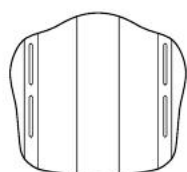


Средней высоты (MT)

Задние пластины для контуров (SC) и (MC)

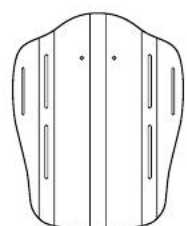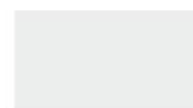

Высокая (UT)

Латеральный, подголовный и грудной для контуров SC, MC, DC и PDC

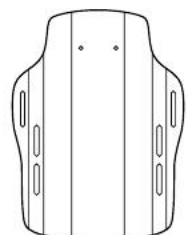

На уровне плеч (SH)

Латеральный, подголовный и грудной для контуров SC, MC, DC и PDC



Ширина

31, 36, 41, 46 and 51 cm

31, 36, 41, 46 and 51 cm

36, 41, 46 and 51 cm



# Спинки

Предлагается большой выбор спинок для инвалидных колясок, чтобы обеспечить пользователей комфортом в любой ситуации. Пользователи с низкими и средними медицинскими показаниями могут выбрать спинки, подходящие им по форме и по вариантам обивки.

## Рама спинки

Нескладная спинка без регулируемого угла наклона, зафиксированная под углом 90°

Положение данной спинки зафиксировано под углом 90°, она не регулируется и не складывается. Идеально подходит для пользователей, которым нужна жесткая спинка с минимальным люфтом при движении коляски.

Идеально подходит для пользователей, которые хотят без увеличения веса коляски пользоваться преимуществами нескладной рамы в сочетании с жесткой спинкой.



Данная опция имеется для инвалидных колясок Xenon и Xenon SA



Данная опция имеется для колясок Neon и Neon SA (4017)



Данная опция имеется для инвалидных колясок Xenon и Xenon SA с подлокотниками





## Нескладная спинка с регулировкой угла наклона

Угол наклона этой спинки может регулироваться от  $+8^\circ$  (вперед) до  $-12^\circ$  (назад) с шагом  $5^\circ$ .

Эта простая, но эффективная конструкция позволяет отрегулировать положение спинки за несколько минут путем перестановки фиксирующих винтов в отверстиях, расположенных на задней части рамы инвалидной коляски.

Уникальный по дизайну механизм обеспечивает пользователей регулируемой спинкой, имеющей несколько жестко фиксированных положений без люфта при движении.



Данная опция имеется для колясок Neon, Neon SA и Argon (4018)



Данная опция имеется для коляски Easy Life



Данная опция имеется для колясок Xenon и Xenon SA



Данная опция имеется для колясок Xenon и Xenon SA с подлокотниками



Данная опция имеется для коляски Helium

# Спинки

**Складная спинка с регулировкой угла наклона -**  
данная опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Argon и Helium

Используется тот же механизм, что и в инвалидной коляске с нескладной спинкой, регулируемой по углу наклона (4018). Эта спинка обеспечит пользователя таким же уровнем регулировки с дополнительным преимуществом складывания спинки за несколько секунд с помощью тросика механизма быстрой фиксации, что облегчит хранение и транспортировку инвалидной коляски.







**Спинка с фиксацией в сложенном положении** -  
данная опция имеется для колясок Argon и Helium (4016)

В дополнение к механизму складывания спинки (4029) здесь добавлена функция фиксации ее в сложенном положении с помощью защёлкивающейся рукоятки.

Это позволит пользователям поднимать и переносить инвалидную коляску с зафиксированной в сложенном положении спинкой.



Данная опция имеется для  
коляски Helium (4018)

Примечание: 3 варианта цвета

# Обивка спинки

## Регулируемая обивка спинки (регулируется натяжение)

Каждый тип обивки предлагаемого модельного ряда обеспечит пользователю превосходную опору для спины и упругость за счёт лент, регулирующих натяжение. Они позволяют настроить спинку в соответствии с формой спины пользователя, что обеспечит ему и удобную и комфортную посадку .



**Обивка из нейлона / стандарт** - опция имеется для всех моделей (4032)

Имеется несколько цветов на выбор для колясок Neon, Neon SA и Argon



**Обивка из вентилируемого материала** - опция имеется для всех моделей

Вентилируемый материал обеспечивает хороший воздухообмен и удаление излишнего тепла для повышения комфорта при сидении коляске в течение долгого времени.




**Регулируемая обивка спинки air flow (лёгкий материал)**

- данная опция имеется для колясок Xenon и Xenon SA и Helium



**Алкантара** - опция имеется для колясок Xenon и Xenon SA и Helium (коричневого и серого цвета)



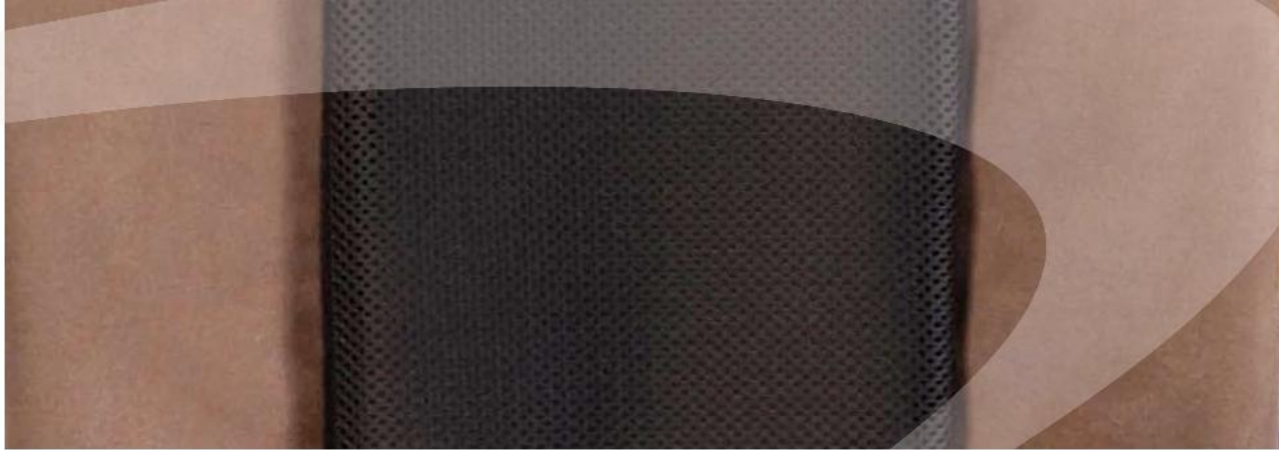

**Жесткая спинка** - опция для колясок Neon и Neon SA (4025)

Эта съёмная жесткая спинка с обивкой для повышения комфорта, подвешиваемая на трубках рамы спинки, идеально подходит пользователям, которым нужна дополнительная опора для поясничной области.



**Подушка под спину** - опция имеется только для колясок Neon и Neon SA

Поставляется в двух вариантах: толщиной 30 мм (4035) и толщиной 50 мм (4036)

# Рукоятки

Короткие рукоятки - опция имеется для всех моделей колясок



---

Длинные рукоятки - опция имеется для всех моделей колясок







## Рукоятки



**Складные рукоятки** - опция имеется для всех моделей колясок

Для повышения удобства хранения и транспортировки сложите рукоятки вниз, нажав кнопку.



**Рукоятки, регулируемые по высоте** - опция имеется для всех моделей колясок

Легко регулируются благодаря простому рычагу, создавая более комфортные условия для сопровождающих лиц, управляющих коляской

# Другие опции

## Комплект JAY для регулируемых по высоте рукояток - опция имеется для всех моделей колясок

Этот комплект JAY включает рукоятки, регулируемые по высоте, также все необходимые детали для закрепления любой спинки JAY на рукоятках.



## Откидная штанга-стабилизатор - опция имеется для колясок Neon, Neon SA и Xenon SA

Окрашенная в цвет рамы коляски штанга-стабилизатор крепится на трубах спинки и дает дополнительную жесткость складным коляскам. Идеально подходит для использования со спинкой с регулируемым натяжением.



## Складная штанга-стабилизатор - опция имеется для колясок Neon, Neon SA и Xenon SA

Закрепляемая на рукоятках коляски штанга-стабилизатор дает дополнительную жесткость складным коляскам. Идеально подходит для использования со спинкой с регулируемым натяжением.

Сдвиньте чехол от центра, и штанга-стабилизатор сложится вместе с коляской

Эта опция доступна только для коляски, оборудованной рукоятками, регулируемыми по высоте



Neon и Neon SA



Xenon и Xenon SA



## Другие опции



Автоматическая складная штанга-стабилизатор - опция имеется для колясок Easy Life, Xenon и Xenon SA



Овальная дуга спинки (OSB) - опция имеется для коляски Helium



Полускладная спинка - опция имеется для колясок Easy Life, Xenon и Xenon SA



# Другие опции

**Подголовник** - опция имеется для колясок Neon и Neon SA, Xenon SA (высокий средний и маленький)

Подголовник типа Quickie регулируется по высоте и углу наклона, его также можно установить ассиметрично относительно обивки по желанию пользователя. Два размера: стандартный (4027) и большой (4044)

Примечание: для всех моделей подголовники одинаковые, но держатели разные в зависимости от модели.



Подголовник



Имеется для колясок Neon и Neon SA

**Фиксирующий ремень** - опция имеется для всех моделей колясок

Для повышения уровня безопасности выберите себе фиксирующий ремень Quickie с замком, как у автомобильного ремня безопасности.



**Комплект для увеличения глубины сиденья** - опция имеется для колясок Neon, Neon SA и Argon

Вставив детали для увеличения глубины в трубки сиденья, Вы увеличите его глубину на 5 см. Это требуется при использовании спинок других производителей, таких как Jay® или для удлинения сиденья в направлении бедра.

Данная опция не совместима с фиксированной под углом 90° спинкой (4017) и ограничена весом пользователя до 70 кг.



**Запасной чехол с молнией для подушки на сиденье** - опция имеется для всех моделей колясок





## Подлокотники



**Мягкий подлокотник типа Quickie** - опция имеется для колясок Neon, Neon SA и Argon

Подлокотник с обивкой типа Quickie имеет небольшой вес и подходит активным пользователям. Его можно откинуть в сторону или вообще снять для удобства посадки в коляску и высадки из нее.



Опция имеется для колясок Neon, Neon SA и Argon

**Подлокотник на стойке, регулируемый по высоте, длинный** - опция имеется для всех моделей колясок

Съемный, регулируемый по высоте подлокотник поставляется в комплекте с боковиной и мягкой накладкой для удобства посадки в коляску и высадки из нее.



Опция имеется для колясок Xenon, Helium и Easy Life

**Подлокотник на стойке, регулируемый по высоте, короткий** - опция имеется для колясок Xenon, Helium и Easy Life.



**Механизм быстрой фиксации** - опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Xenon, Xenon SA и Easy Life

Данная конструкция крепится непосредственно на основание подлокотника для использования с подлокотниками с фиксированной или с регулируемой высотой



# Подлокотники и боковины

Широкий ассортимент подлокотников и боковин поможет каждому пользователю подобрать всё необходимое при любых медицинских показаниях и для любого стиля жизни

## Подлокотник, не регулируемый по высоте

Не регулируемый по высоте подлокотник поставляется в комплекте с боковиной окрашенной в цвет рамы.

Используя рычаг быстрой фиксации, пользователи могут сдвинуть подлокотник назад, откинуть вместе с боковиной к спинке или полностью снять для удобства посадки в коляску и высадки из нее.

Этот вариант может поставляться (как показано ) или без подлокотника или с коротким подлокотником для инвалидных колясок Xenon SA, Easy Life, Neon и Neon SA или с длинным подлокотником для инвалидных колясок Xenon SA, Easy Life



Опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Xenon, Xenon SA

## Подлокотник, регулируемый по высоте - имеется для колясок Neon, Neon SA, Xenon SA и Easy Life

Как и не регулируемый по высоте подлокотник его можно сдвинуть назад, откинуть вместе с боковиной к спинке или полностью снять для удобства посадки в коляску и высадки из нее.

Пользователь может изменять высоту подлокотника с помощью кнопки, расположенной сбоку на нижней части подлокотника.

Этот подлокотник поставляется следующих размеров:

короткий (25 см) и длинный (30 см)



Опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Xenon SA и Easy Life





**Узкая легкая боковина из карбона** - опция имеется для колясок Argon, Helium, Xenon, Xenon SA

Изготовленная из легкого карбонового волокна эта боковина обеспечивает пользователю поддержку и защиту при очень малом весе.



Helium, Xenon, Xenon SA  
и Easy Life



Neon, Neon SA и Argon

**Съемная боковина из пластика** - опция имеется для всех моделей колясок

Эта легкая и жесткая боковина, выполненная из черного пластика, обеспечивает пользователю поддержку и защиту, она легко снимается для удобства посадки в коляску и высадки из нее.



**Опция откидывания боковины назад** - опция имеется для колясок Argon, Neon, Neon SA

Эта опция, выбранная в комбинации с прямой боковиной из алюминия или с боковиной из алюминия с защитой одежды позволяет откидывать боковину назад для удобства посадки в коляску и высадки из нее.

# Боковины

**Прямая боковина из алюминия** - опция имеется для всех моделей колясок

Эта прямая боковина из алюминия, окрашенная в цвет рамы, защищает от грязи и при этом придаёт ощущение комфорта за счёт слоя вспененного материала на ее внутренней стороне и обеспечивает стабильное положение пользователя.


Поставляется как жестко закрепленная (стандартное исполнение) так и с опцией опрокидывания назад (4233)



**Боковина из алюминия с защитой одежды** - опция имеется для всех моделей колясок

Эта боковина из алюминия, окрашенная в цвет рамы, загибается на колесо и обеспечивает дополнительную защиту от грязи и при этом придаёт ощущение комфорта за счёт слоя вспененного материала на ее внутренней стороне и обеспечивает стабильное положение пользователя.

Поставляется как жестко закрепленная (стандартное исполнение) так и с опцией опрокидывания назад. Идеально подходит для использования с внедорожными колесами.

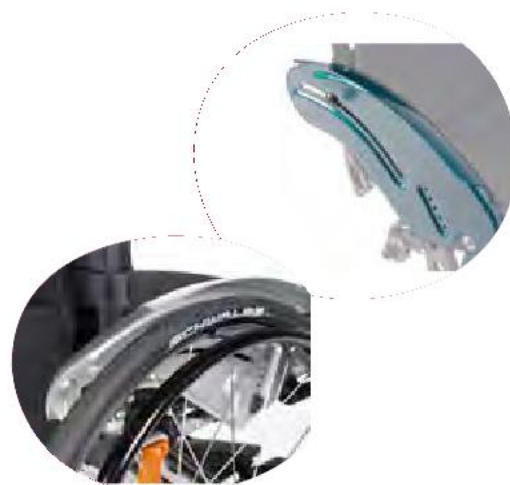

**Боковина из карбона с защитой одежды** - опция имеется для всех моделей колясок

Эта боковина загибается на колесо и обеспечивает дополнительную защиту от грязи и при этом придаёт ощущение комфорта за счёт слоя вспененного материала на ее внутренней стороне и обеспечивает стабильное положение пользователя.

Идеально подходит для пользователей, стремящихся снизить вес коляски.






## Сужение рамы в передней части

Сужение рамы - это расстояние, на которое рама сужается с каждой стороны в передней части, обеспечивая модный внешний вид и увеличение маневренности коляски, а также дополнительную защиту голени пользователя




0 см или 3 см для коляски Helium  
0 см или 1 см для коляски Xenon

0 см, 2 см, 4 см для коляски Argon  
0 см или 2 см для коляски Neon

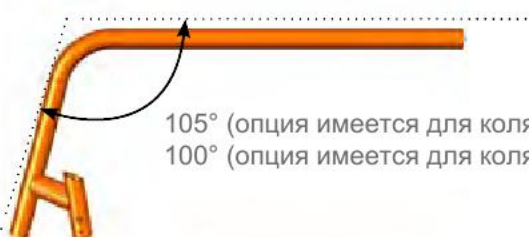

105° (опция имеется для колясок Argon и Neon)  
100° (опция имеется для колясок Helium и Xenon)

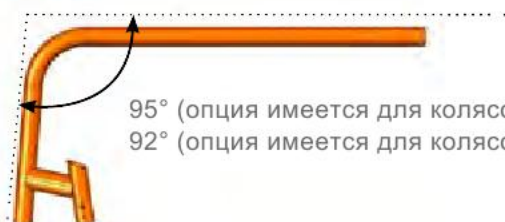

95° (опция имеется для колясок Argon и Neon)  
92° (опция имеется для колясок Helium и Xenon)

Угол передней части рамы -  
два варианта угла рамы



# Подножки

Фиксированные, откидные или подъёмные подножки для ног вместе с большим количеством различных опор для стоп удовлетворяют потребности любого клиента

## Подножки

**Подножки типа Quickie** - опция имеется для Neon SA

Подножки типа Quickie, расположенные под углом 70° или 90° можно откидывать наружу или внутрь, чтобы освободить место для посадки/высадки, или полностью снять для складирования или транспортировки коляски.

Эти подножки обеспечивают ступенчатую регулировку длины голени от 22 см до 50 см, в зависимости от конфигурации коляски



**Подножки типа Sopur** - опция имеется для Neon SA

Подножки типа Sopur, расположенные под углом 75° можно откидывать наружу или внутрь, а также полностью снять. Благодаря новой технологии значительно снижен люфт подножек.

Размер механизма фиксации увеличен, поэтому подножки стали проще в использовании для людей с ограниченными возможностями.

Эти подножки обеспечивают ступенчатую регулировку длины голени от 22 см до 50 см, в зависимости от конфигурации коляски





## Откидные и подъемные подножки

**Подъемные подножки** - опция имеется для Neon SA, Xenon SA

Положение подъемной подножки Quickie по высоте легко регулируется с помощью рычажка.

Можно выбрать правую подножку, левую или обе в зависимости от потребностей пользователя.

Эти подножки, окрашенные в цвет рамы, поставляются с различными опорами для стоп. Они откидываются внутрь или наружу, а также их можно полностью снять

S

---

**Подъемные подножки** - опция имеется для Neon SA, Xenon SA, Easy Life

Можно выбрать правую подножку, левую или обе в зависимости от потребностей пользователя.



# Опоры для стоп

## Складные вверх опоры для стоп из композиционного материала - опция имеется для Neon SA, Xenon SA

Складные вверх опоры для стоп Quickie, прошедшие тесты и испытания, сделаны из композитного пластика, они лёгкие и в то же время прочные.

Используя опору для стоп в комплекте с откидной подножкой, её можно сложить вверх или откинуть всю подножку в сторону.

Также доступна опция с регулируемым углом наклона опоры для стоп для удовлетворения более специфических требований пользователя.



## Раздельные опоры для стоп из композитного материала с регулируемым углом наклона - опция имеется для Neon SA, Xenon SA и Easy Life

опция имеется для Neon SA, Xenon SA и Easy Life

Используя опору для стоп в комплекте с откидной поножкой, её можно сложить вверх или откинуть всю подножку в сторону, а также можно отрегулировать угол наклона и высоту опоры для стоп



## Раздельные опоры для стоп из алюминия с регулировкой угла наклона и глубины - опция имеется для Neon SA, Xenon SA

опция имеется для Neon SA, Xenon SA

Аналогично сплошной опоре для стоп раздельные опоры изготовлены из алюминия и окрашены в цвет рамы.

Эти опоры для стоп, регулируемые по углу наклона и высоте, можно сдвинуть вглубь для удобства посадки в коляску и высадки из нее, а также откинуть в случае использования откидной подножки.







**Раздельные опоры для стоп из алюминия с регулировкой угла наклона и глубины - опция имеется для Easy Life**



При использовании опоры для стоп с откидной подножкой пользователь может сдвинуть опору для стоп вглубь или откинуть, а также отрегулировать угол наклона и высоту опоры для стоп.

**Сплошная опора для стоп из алюминия с регулировкой угла наклона и глубины - опция имеется для колясок Easy Life, Neon, Neon SA, Xenon, Xenon SA**



Сплошная опора для стоп изготовлена из алюминия и окрашена в цвет рамы. Она повышает жесткость любой складной коляски и прекрасно подходит пользователям, которым нужна стабильная и прочная опора для стоп в виде платформы.

Данная опора для стоп поставляется в комплекте с горизонтальным ремнём для голени, её угол наклона может регулироваться в соответствии индивидуальными требованиями пользователей. При необходимости, опору для стоп можно сложить вверх.



**Механизм откидывания подножки - опция имеется для Xenon SA, Neon и Neon SA**

# Сплошная опора


## Облегченная сплошная опора для стоп с регулировкой угла наклона и глубины -

опция имеется для колясок Helium, Neon, Xenon, Xenon SA

Как в коляске Argon сплошная опора для стоп в виде платформы позволяет регулировать ее угол наклона, глубину и длину голени.

Эта опора может откидываться вверх для посадки / высадки или когда коляска складывается.

Опционально поставляется изготовленная из черного композитного пластика, из карбона или алюминия, окрашенного в цвет рамы.

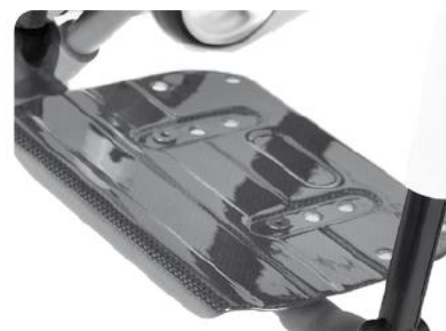

Сплошная опора для стоп из карбонового волокна

## Автоматическая складная опора для стоп -

опция имеется для колясок Neon и Xenon

Автоматическая складная опора для стоп обеспечивает пользователю крепкое и прочное основание, которое может регулироваться по высоте, глубине и углу наклона для удовлетворения всех нужд пользователя.

Опционально поставляется изготовленная из черного композитного пластика или из карбона (только для коляски Xenon), она автоматически складывается при складывании коляски, обеспечивая быстроту и простоту складывания при транспортировке и хранении коляски.



## Пластины для позиционирования стоп -

опция имеется для всех моделей колясок

Пластины для позиционирования стоп Quickie обеспечивают пользователей дополнительной опорой и ограничивают движения стоп.

Они монтируются на сплошную опору для стоп типа платформы







**Трубчатая подножка** - опция имеется для колясок Helium и Argon (2106)

Эта легкая алюминиевая подножка обеспечивает инвалидной коляске высочайшую жесткость и надежную опору для стоп.




**Трубчатая подножка с пластинчатой крышкой** - опция имеется для колясок Helium и Argon (2105)

Как трубчатая подножка, только с пластинчатой крышкой на защелках



**Опора для стоп в виде платформы с регулировкой угла наклона и глубины** - опция имеется для колясок Helium, Argon, Xenon, Xenon SA

Опору для ног можно регулировать по глубине и углу наклона, а благодаря телескопическим трубкам подножки можно настроить длину голени.

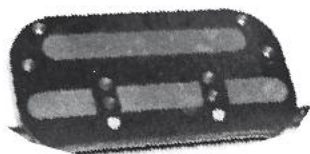

Сплошная композитная опора для стоп с регулировкой угла наклона



Сплошная алюминиевая опора для стоп с регулировкой угла наклона Performance



# Сплошная опора

**Опция Подножка для высокого монтажа** - опция имеется для колясок Helium, Argon, Neon, Neon SA, Xenon, Xenon SA

Опция подножка высокого монтажа идеально подходит для пользователей с короткой голенью. Поставляется в двух вариантах: с отдельными опорами для стоп и со сплошной опорой для стоп.

Поставляемые опоры для стоп отличаются друг от друга в зависимости от модели коляски.

Поставляется с опорами для стоп из алюминия, окрашенного в цвет рамы или из композитного пластика.





## Адаптеры оси заднего колеса

С помощью различных осевых адаптеров, позволяющих пользователям установить положение центра тяжести и высоту сиденья в зависимости от их потребностей, обеспечивается точная настройка и индивидуальная регулировка инвалидной коляски.

### Осевой адаптер коляски Neon

Все варианты осевых адаптеров Neon были спроектированы, чтобы регулировка высоты сиденья и центра тяжести с помощью отверстий и болтов, была быстрой и простой.

Каждый осевой адаптер уникален по конструкции и обеспечивает инвалидной коляске регулировки различного уровня. Более подробная информация по регулировкам с помощью каждого из осевых адаптеров, имеется в бланке заказа.



Стандартный адаптер



Короткий адаптер



Адаптер для ампутантов



Адаптер для использования коляски с Handbike



Адаптер с амортизацией

# Осевые адаптеры

## Осевой адаптер коляски Argon

Осевые адаптеры для колясок Argon и Argon Ti обеспечивают пользователям быстрые и простые настройки высоты сиденья и положения центра тяжести.

В отличие от адаптеров Neon все эти осевые адаптеры обеспечивают пользователя огромным количеством настроек в пределах ряда. Более подробная информация по регулировкам с помощью каждого из осевых адаптеров, имеется в бланке заказа.



Стандартный адаптер Argon



Адаптер для ампутантов Argon



Адаптер Argon для использования коляски с Handbike



Адаптер Argon с амортизацией





## Вилки передних колёс

Имеется широкий выбор вилок передних колёс ( для инвалидных колясок Xenon, Helium, Easy Life различной длины и ширины, 3 цвета) а также передняя вилка с амортизацией Frog leg.



Длинная лёгкая широкая  
длина (98 мм, 111 мм,  
123 мм), ширина 45 мм



Длинная лёгкая узкая  
длина (98 мм, 111 мм, 123  
мм), ширина 45 мм



**Вилка** - для коляски Easy Life (два варианта длины и два варианта ширины)

# Вилки передних колес

**Фиксатор переднего колеса** – опция имеется для инвалидных колясок Neon, Neon SA и Argon (5854)



---

**Быстросъемная ось вилки переднего колеса** – опция имеется для инвалидных колясок Neon, Neon SA и Argon (5826)





Вилка Frog leg с амортизацией – опция имеется для колясок Xenon, Xenon SA и Helium



# Передние колеса

**Пневматическое переднее колесо** — опция имеется для колясок Xenon SA, Neon SA и Easy Life

Передние колёса, накачанные воздухом, обеспечивают для пользователей, предпочитающих ездить по неровным поверхностям, больше комфорта, чем их жёсткий эквивалент.

Имеющиеся размеры: 6" и 7"



---

**Литые передние колеса** — опция имеется для колясок Xenon, Xenon SA, Neon, Neon SA, Helium и Argon

Жесткие передние колёса из полиуретана не прокалываются, не нуждаются в обслуживании и обладают очень низким сопротивлением качению, что способствует экономии затрат энергии на приведение коляски в движение

Имеющиеся размеры: 4", 5", 6" и 7". Колеса меньшего размера обеспечивают снижение радиуса поворота и увеличение пространства для стоп





**Мягкие литые передние колеса** — опция имеется для всех моделей колясок

Эти литые передние колёса имеют более широкий обод, они изготовлены из более мягкой полимерной композиции, за счёт чего обеспечивается плавное движение и при этом колёса не нуждаются в обслуживании.

Имеющиеся размеры: 5" и 6".



**Передние колеса на алюминиевом ободе** — опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Helium и Argon

Эти низкопрофильные, не нуждающиеся в обслуживании жесткие колеса выполнены со стильным алюминиевым ободом, они обеспечивают высокую маневренность коляски.

Имеющиеся размеры: 4" и 5".



**Жесткие светящиеся ролики** — опция имеется для всех моделей колясок кроме Easy Life

Если ваша коляска оснащена светящимися роликами, вы будете выделяться из толпы. Эти ролики также не требуют технического обслуживания.

Имеющиеся размеры: 3", 4" и 5".

# Задние колеса

## Колеса с радиальными спицами

Эти стандартные колеса с радиальными спицами в комплекте с быстросъемными осями поставляются размером 20", 22" и 24".



## Колеса со скрещенными спицами - опция имеется для всех моделей колясок

Эти стандартные колеса со скрещенными спицами в комплекте с быстросъемными осями поставляются размером 20", 22", 24" и 26".



## "Дизайнерские" колеса - опция имеется для всех моделей колясок

Эти стильные и отполированные до блеска алюминиевые колеса с радиальными спицами имеют 2-х размеров: 22" и 24".







**Облегченные колеса** - опция имеется для всех моделей колясок

Это самая легкая модель из стандартных колес, имеющих на рынке.

С этими колёсами инвалидная коляска будет на 1,5 кг легче, по сравнению с колесами с радиальными спицами.

Нельзя использовать с жёсткими литыми шинами (5168).



**Колеса Proton (сверхлегкие)** - опция имеется для колясок Xenon, Xenon SA и Helium



**Колеса Spinerger Everday SPOX** - опция имеется для всех моделей колясок

Эти колеса выполнены со специальным двухстеночным ободом высокой прочности. Они чрезвычайно надёжны и удобны для ежедневного пользования.

Лёгкие, надёжные и не требуют технического обслуживания.

Поставляются размером 24", 25" и 26"

# Шины

**Стандартные гладкие шины** - опция имеется для всех моделей колясок кроме Easy Life

Эти пневматические шины гарантируют плавный ход инвалидной коляски, а отсутствие протектора обеспечивает низкое сопротивление качению.

Поставляются размером 22", 24" и 26"



:22", 24" и 26"

**Литые жесткие шины** - опция имеется для всех моделей колясок

Эти литые черные не оставляющие следов на полу шины имеют низкий профиль для малого сопротивления качению.

Поставляются размером 24".  
Нельзя использовать с облегченными колесами.



**Профильные литые шины 22" 1-3/8"** - опция имеется для колясок Neon, Neon SA и Argon (5233)

Эти литые шины с протектором обеспечат коляске повышенное сцепление и устойчивость при езде.

Поставляются размером 22".  
Нельзя использовать с облегченными колесами.





**Шины Schwalbe Downtown** - опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Argon, Xenon, Xenon SA.



При каждом толкании колес и особенно при торможении, контакт рук с шинами приводит к раздражению и потертостям кожи. Шины Schwalbe Downtown с запатентованной технологией двойного сцепления имеют совершенно гладкие боковины, за счёт чего руки плавно скользят по шинам без раздражения кожи. Поставляются размером 24".



**Шины Schwalbe Speedrun** - опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Argon, Xenon, Helium.

Новые пневматические шины Speedrun пригодны для ручных велосипедов, для спортсменов, занимающихся в закрытых помещениях и для ежедневного использования. Они очень лёгкие – всего 190 г и имеют надёжный защитный слой. Чёрная каучуковая композиция не оставляет следы на полу, поэтому эти шины пригодны и для помещений. Поставляются в комплекте с колесами Spinegry или облегчёнными колесами, размером 25"

**smartguard®**



**Шины Marathon Plus Evolution** - опция имеется для всех моделей колясок.

Перфорированная защитная лента новейшей технологии SmartGuard® чрезвычайно эффективно защищает камеру от повреждений. Вставка, сделанная из специального высокоэластичного каучука, обеспечивает надёжную защиту от глубоких проколов. Шина Marathon Plus сочетает в себе комфорт и лёгкость хода пневматической шины с защитой от проколов, свойственной литым шинам.



Поставляются размером 24".

**Колеса Schwalbe Mountain Bike Wheel** - опция имеется для всех моделей колясок кроме Easy Life.

Эта опция включает внедорожные колеса 24" в комплекте с обручами, окрашенными порошковой краской, и шинами Schwalbe Two Grip.



Эти внедорожные шины для инвалидных колясок 24" имеют крепкие боковины и увеличенный объем, поэтому хорошо подходят для бездорожья



# Обручи



Обруч из алюминия с серебристым порошковым покрытием - опция имеется для всех моделей

Обруч из оксидированного алюминия - опция имеется для всех моделей

Обруч из легированной стали - опция имеется для всех моделей

Обруч из алюминия с окраской - опция имеется для всех моделей

Обруч из титана с порошковым покрытием - опция имеется для всех моделей

Обруч из титана - опция имеется для всех моделей кроме Easy Life

Силиконовый чехол на обруч - опция имеется для всех моделей кроме Easy Life

Обруч Supergrip - опция имеется для всех моделей



Обруч Maxgrip - опция имеется для колясок Xenon, Xenon SA и Helium





**Задние колеса с барабанными тормозами** -  
опция имеется для колясок Xenon, Xenon SA, Easy Life,  
Neon, Neon SA



# Защита спиц

Добавьте Вашей коляске индивидуальности с помощью защиты спиц для задних колёс размером 22" и 24". Также доступна прозрачная защита спиц (не показана здесь) размером 22", 24" и 26".



5011 Abstract



5019 Creative



5000 Princess



5001 Dancing Bear



5135 Cheese



5015 Feather



5002 Jungle Fever



5004 Happy Lions



5005 Water World



5006 Randolf



5017 Chrome Wheel



5025 Oriental



5007 Monkeys



5008 Pirates



5012 Racing



5014 Dirt Race



# Защита спиц



5003 Superhero



5018 Graffiti



5023 Basketball



5024 Basketball 2



5134 Galaktica



5016 Hot Wheels



5013 Pool



5022 Flying Water



5021 Space



5130 Fantasy



5129 Bibbo



5127 Rotation



5009 Tiger



5010 Zebra



5120 Silk



5128 Graphik

# Тормоза

**Стандартный тормоз** - опция имеется для всех моделей кроме Easy Life

Для облегчения пользования данный тормоз приводится в действие с помощью пружины. Когда он задействован, рычаг направлен наружу и не мешает переноске коляски.



**Рычажный тормоз** - опция имеется для всех моделей кроме Easy Life

Для облегчения пользования данный тормоз приводится в действие с помощью пружины. Он монтируется на уровне колен для легкого доступа и пригоден для большинства пользователей.



**Удлиняющая рукоятка** - опция имеется для всех моделей колясок.

Эта рукоятка упрощает управление рычажным тормозом для пользователей с ограниченными двигательными возможностями.

Поставляется для комплектации с рычажным тормозом



**Противооткатное устройство** - опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Argon (6005).

Это приспособление предотвращает откатывание коляски назад на склонах и гарантирует безопасность и спокойствие при подъёме по крутым уклонам







**Компактный тормоз** - опция имеется для всех моделей колясок

Идеально подходит для пользователей с ограниченными возможностями



**Компактный легкий тормоз** - опция имеется для колясок Xenon и Helium



**Нажимной тормоз** - опция имеется для коляски Easy Life



# Аксессуары

**Держатель трости** - опция имеется для всех моделей колясок

Держатель просто монтируется и позволяет фиксировать трости (костыли) так, чтобы они не мешались, но при этом были легко доступными.

Поставляется с вспомогательным устройством (1230)



**Антипрокидыватель** - опция имеется для колясок Neon, Neon SA, Easy Life и Argon.

Предотвращает опрокидывание коляски назад. Сопровождающее лицо может ногой управлять им.



**Антипрокидыватель** - опция имеется для колясок Xenon, Xenon SA и Helium



**Антипрокидыватель типа Quickie** - опция имеется для колясок Xenon SA, Helium и Argon





**Транспортные ролики** - опция имеется для всех моделей.

Предназначены для того, чтобы обеспечить пользователям в проезд в узких местах после замены больших задних колёс на транспортные ролики.



**Ножной рычаг для опрокидывания** - опция имеется для всех моделей.

Это приспособление позволяет сопровождающему лицу с лёгкостью наклонять коляску назад для подъёма на бордюры и ступеньки.

Поставляется для монтажа справа, слева или парой.



**Защита рамы** - опция имеется для всех моделей колясок кроме Easy Life.

Раму можно защитить от царапин и сколов при ежедневном использовании с помощью этого защитного рукава, простого в применении. Подходит для установки на переднюю раму или кронштейны подножек.

### Воздушный насос -

опция имеется для всех моделей колясок кроме Easy Life.

Насос типа велосипедного.



---

### Воздушный насос высокого давления -

опция имеется для всех моделей колясок кроме Easy Life.

Высококачественный насос высокого давления с манометром.



---

### Рюкзак Quickie - опция имеется для всех моделей

Стильный рюкзак Quickie вешается непосредственно на рукоятки и идеально подходит для дорожных вещей.







**Держатель для мобильного телефона** - опция имеется для колясок Xenon, Xenon SA, Neon и Argon



**Приспособление для перевозки сумок** – опция имеется для всех моделей.

Может использоваться для перевозки ноутбуков и портфелей.



**Сетка для багажа** - опция имеется для всех моделей кроме Easy Life.

Snoll on - опция имеется для Helium.



Терапевтический столик сдвижной



Терапевтический столик откидной





Набор инструментов - опция имеется для всех ,  
моделей